

# ООО МТСК «Лаборатория»

Адрес: 109202, г. Москва, ш. Фрезер, д.5/1, помещение 1, оф. 47


Тел./факс: (495) 640-2583

ИНН/КПП: 7721792651 / 772101001

ОГРН: 1137746359519

Лицензия на осуществление деятельности

по техническому обслуживанию №ФС-99-04-001260 от 22.04.14 г.

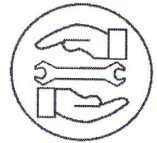

[www.mtsklab.ru](http://www.mtsklab.ru)

## Работы по техническому обслуживанию Hamilton Galileo

1. Внешний осмотр блоков аппарата на наличие механических повреждений;
2. Проверка присутствия и читаемости всех наклеек на аппарате;
3. Проверка тормозных зажимов стойки аппарата;
4. Проверка соединительных кабелей, проверка разъемов и фиксаторов, трубок на наличие видимых физических повреждений;
5. Прочистка печатных плат от загрязнений с частичной разборкой;
6. Проверка или обновление программного обеспечения в соответствии с рекомендациями завода производителям;
7. Демонтаж компонентов с закончившимся сроком эксплуатации;
8. Установка компонентов в замен демонтированных;
9. Проверка памяти ошибок аппарата;
10. Калибровка смесителя;
11. Калибровка клапана выдоха;
12. Калибровка датчиков давления;
13. Калибровка кислородной ячейки;
14. Тестирование микропроцессора;
15. Тестирование GPT-GMP и световой индикации;
16. Тестирование дисплея;
17. Тестирование пользовательского интерфейса и тона звука;
18. Тестирование GCP- GMP коммуникаций;
19. Тестирование AC/DC конвертера;
20. Тестирование DC/AC конвертера;
21. Тестирование кислородной ячейки;
22. Тестирование смесителя;
23. Тестирование внутреннего технического контура датчика потока;
24. Тестирование предохранительного клапана;
25. Тестирование клапана безопасности;
26. Тестирование клапана вдоха;
27. Тестирование клапана выдоха;
28. Тестирование компрессора небулайзера;
29. Тестирование внутренней батареи;
30. Тестирование аварийного динамика;
31. Проверка блока питания;

32. Выдача протокола контроля технического состояния аппарата.

Инженер-разработчик  
ООО МТСК «Лаборатория»:

