

ООО МТСК «Лаборатория»

Адрес: 109202, г. Москва, ш. Фрезер, д.5/1, помещение 1, оф. 47


Тел./факс: (495) 640-2583

ИНН/КПП: 7721792651 / 772101001

ОГРН: 1137746359519

Лицензия на осуществление деятельности

по техническому обслуживанию №ФС-99-04-001260 от 22.04.14 г.

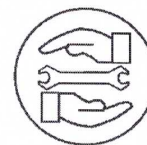

www.mtsklab.ru

Работы по техническому обслуживанию Hamilton-T1

1. Внешний осмотр блоков аппарата на наличие механических повреждений;
2. Проверка присутствия и читаемости всех наклеек на аппарате;
3. Проверка тормозных зажимов стойки аппарата;
4. Проверка соединительных кабелей, проверка разъемов и фиксаторов, трубок на наличие видимых физических повреждений;
5. Прочистка печатных плат от загрязнений с частичной разборкой;
6. Проверка или обновление программного обеспечения в соответствии с рекомендациями завода производителем;
7. Демонтаж компонентов с закончившимся сроком эксплуатации;
8. Установка компонентов взамен демонтированных;
9. Проверка памяти ошибок аппарата;
10. Калибровка тачскрина;
11. Калибровка клапана выдоха;
12. Калибровка датчиков давления;
13. Калибровка кислородной ячейки;
14. Калибровка датчика потока;
15. Тестирование системы тревог;
16. Тестирование монитора тревог 1;
17. Тестирование монитора тревог 2;
18. Тестирование пользовательского интерфейса;
19. Тестирование бинарного клапана;
20. Тестирование автообнуления датчиков давления;
21. Тестирование потока турбины;
22. Тестирование давления турбины;
23. Тестирование клапана выдоха;
24. Тестирование подключения кислорода;
25. Тестирование клапана небулайзера;
26. Тестирование предохранительного клапана;
27. Тестирование внутреннего технического контура датчика потока;
28. Тестирование датчика давления HEPA фильтра;
29. Тестирование погрешностей датчиков давления;
30. Тестирование погрешностей потока;
31. Тестирование смесителя кислорода;

32. Тестирование герметичности;
 33. Тестирование звуковой и световой индикации;
 34. Тестирование батарейного переключателя;
 35. Тестирование аварийного динамика;
 36. Проверка вентилятора охлаждения;
 37. Проверка датчика CO2(при наличии)*;
 38. Проверка датчика SpO2(при наличии)*;
 39. Проверка вызова медперсонала (при наличии);
 40. Проверка электробезопасности аппарата;
 41. Тестирование электробезопасности CO2 *;
 42. Тестирование электробезопасности SPO2 *;
 43. Выдача протокола контроля технического состояния аппарата.
- «*» - обозначены возможные опции.

Перечень запчастей и расходных материалов для проведения комплексного ТО**	Кат. Номер
HEPA фильтры для Hamilton T1	161236
Набор пылевых фильтров для HEPA и вентилятора охлаждения для Hamilton T1	161275
Модуль турбины	Кат. номер: MSP161170 / сер. номер: меньше 3000 кат. номер: PN161247
Набор аккумулятора литий-ионного	369108
Датчик кислорода C2/T1	396200

«**» - Перечень зависит от часов наработки и даты выпуска аппарата

Инженер-разработчик
ООО МТСК «Лаборатория»:

